

# Wszystko posortowane

w kilka sekund z nowym sorterem BL 3500



Automatyka laboratoryjna



# Zwiększ wydajność swojego laboratorium

Czas jest istotnym czynnikiem w codziennej praktyce laboratoryjnej. Zespoły laboratoryjne mają do dyspozycji niezawodnego członka ekipy w postaci sortera BL 3500, który zapewnia wydajne i bezbłędne wsparcie w sortowaniu próbek – szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

## Kompaktowy i ergonomiczny

Dzięki kompaktowym wymiarom 1385 x 905 x 1455 mm BL 3500 zmieści się także w niewielkim laboratorium. BL 3500 łączy w sobie zaawansowanie techniczne z optymalnie zaprojektowaną i zajmującą niewiele miejsca konstrukcją.

## Przepustowość 3500 próbek/godzinę

Szybkość i niezawodność są istotnymi czynnikami w sortowaniu próbek. Również w tym zakresie BL 3500 wyznacza nowe standardy.

Dzięki przepustowości do 3500 próbek na godzinę sorter BL 3500 jest jednym z najszybszych na rynku i stanowi podstawę wyposażenia każdego nowoczesnego laboratorium – dużego i małego.

## Funkcja inteligentnej pętli

Nie można jednoznacznie zidentyfikować próbki z materiałem albo zlecenie nie jest jeszcze aktywne w systemie LIS? Dzięki funkcji inteligentnej pętli w BL 3500 nie stanowi to żadnego problemu. Jeśli sortowanie nie jest możliwe, próbka zostaje skierowana do oddzielnego pojemnika, co stanowi łatwe i nieskomplikowane rozwiązanie.



## Szybki transport i sortowanie próbek



Skróć całkowity czas realizacji badania (TAT), podając próbki bezpośrednio do BL 3500 za pomocą systemu transportu próbek Tempus600®.

Więcej informacji:  
[s-monovette-tempus600.sarstedt.com/#tempus600](https://s-monovette-tempus600.sarstedt.com/#tempus600)



# Nowy sorter BL 3500



## Wydajność i oszczędność czasu

- Przyspieszone dostarczanie wyników analiz w celu zapewnienia optymalnej opieki nad pacjentem
- Pilne próbki mogą być przetwarzane w trybie priorytetowym, co zapewnia szybką diagnozę oraz niezwłoczne rozpoczęcie leczenia i opieki nad pacjentami
- Kompaktowa konstrukcja nie zajmuje dużo miejsca i doskonale pasuje do laboratoriów każdej wielkości.



## Łatwość obsługi

- Intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia prostą i wydajną obsługę, zmniejsza zakres wymaganych szkoleń i minimalizuje ryzyko błędów obsługi.
- Zoptymalizowane środowisko pracy: Ergonomiczna konstrukcja zmniejsza obciążenie personelu i zapewnia wygodniejsze, a tym samym bardziej produktywne środowisko pracy.
- Przejrzysta wizualizacja sortowania znacząco przyczynia się do minimalizacji błędów operacyjnych.




## Precyzja

- Minimalizacja ryzyka: Zautomatyzowane przetwarzanie i skanowanie kodów kreskowych zmniejsza ryzyko pomylenia próbek i innych błędów
- Zwiększone bezpieczeństwo i niezawodność podczas analizy: Nieprawidłowo oznakowane próbki są niezawodnie wykrywane i nie zostają wprowadzone do analizatora



## Elastyczność

- Zdolność adaptacji: Ze względu na kompatybilność z różnymi typami i rozmiarami próbek laboratoria mogą elastycznie korzystać z próbek różnych producentów
- Możliwość dostosowania: Różne kryteria sortowania mogą być dostosowane do różnych codziennych czynności.

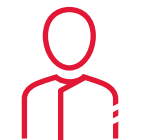

## Odciążenie pracowników

- Możliwość bardziej efektywnego wykorzystania personelu do zadań priorytetowych
- Ograniczenie ręcznych kontroli próbek, które zmniejsza obciążenie pracą



Sorter BL 3500 firmy SARSTEDT – niezbędne uzupełnienie codziennej pracy laboratoryjnej. Więcej informacji: [bl3500.sarstedt.com](http://bl3500.sarstedt.com)



Bufor próbek zapewniający ciągłą, nieprzerwaną pracę

Blokowany uchwyt do przenoszenia\* i obsługi jedną ręką



Możliwość dostarczania próbek przez Tempus600®



Ekspresowe podawanie próbek (próbki STAT) przez oddzielne wejście



Funkcja pętli: Automatyczny zwrot nierozpoznanych próbek lub próbek bez aktywowanego zlecenia testu do obszaru zbiorczego

Automatyczne rejestrowanie próbek w laboratoryjnym systemie informacyjnym (LIS)

\* Zgłoszony patent

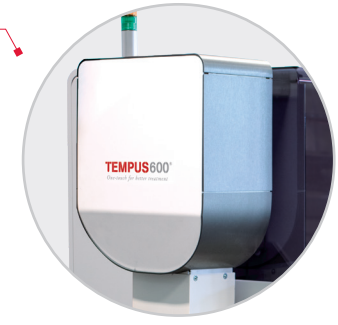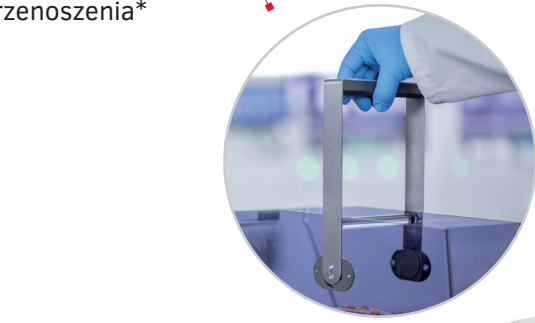

Intuicyjna obsługa

Przejrzysta wizualizacja indywidualnych celów sortowania na wyświetlaczu

Ergonomiczna konstrukcja, która zajmuje niewiele miejsca

Kontrola wiarygodności kodów kreskowych i przygotowania próbek

Kompatybilność ze wszystkimi popularnymi typami próbek

Możliwość dostosowania kryteriów sortowania


# Przedanalizyczny przepływ pracy SARSTEDT

Korzyści z synergii naszych dopasowanych systemów.

Odkryj rozwiązania 360° firmy SARSTEDT do analizy wstępnej:



[workflow.sarstedt.com](http://workflow.sarstedt.com)

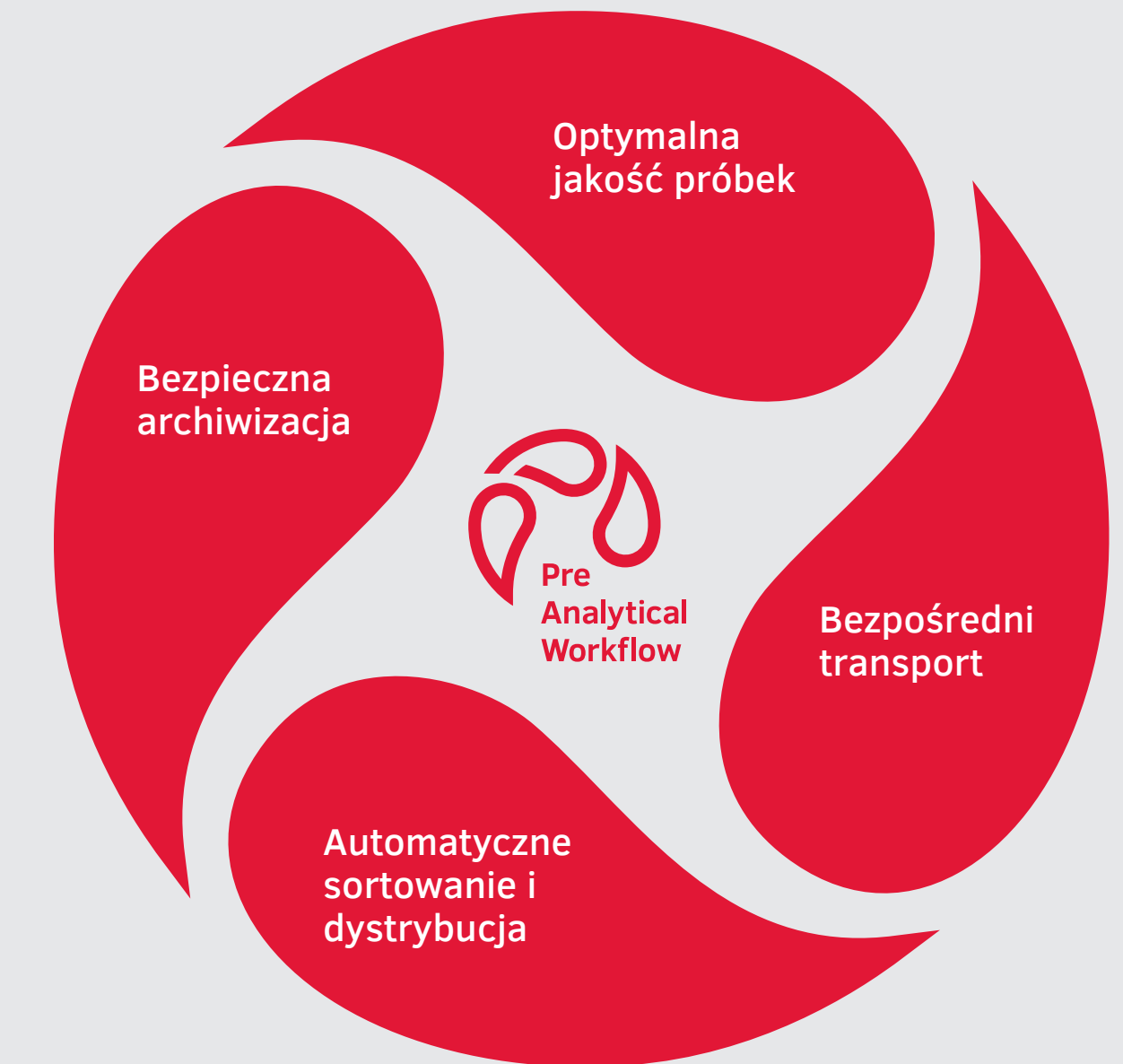

W przypadku pytań:  
Chętnie służymy pomocą!

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

**SARSTEDT Sp. z o.o.**

ul. Grzybowska 87  
00-844 Warszawa

Tel: +48 22 722 05 43  
Fax: +48 22 722 07 95

[info.pl@sarstedt.com](mailto:info.pl@sarstedt.com)  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)



Więcej informacji i nagrania wideo:  
[bl3500.sarstedt.com](http://bl3500.sarstedt.com)